


Användarmanual

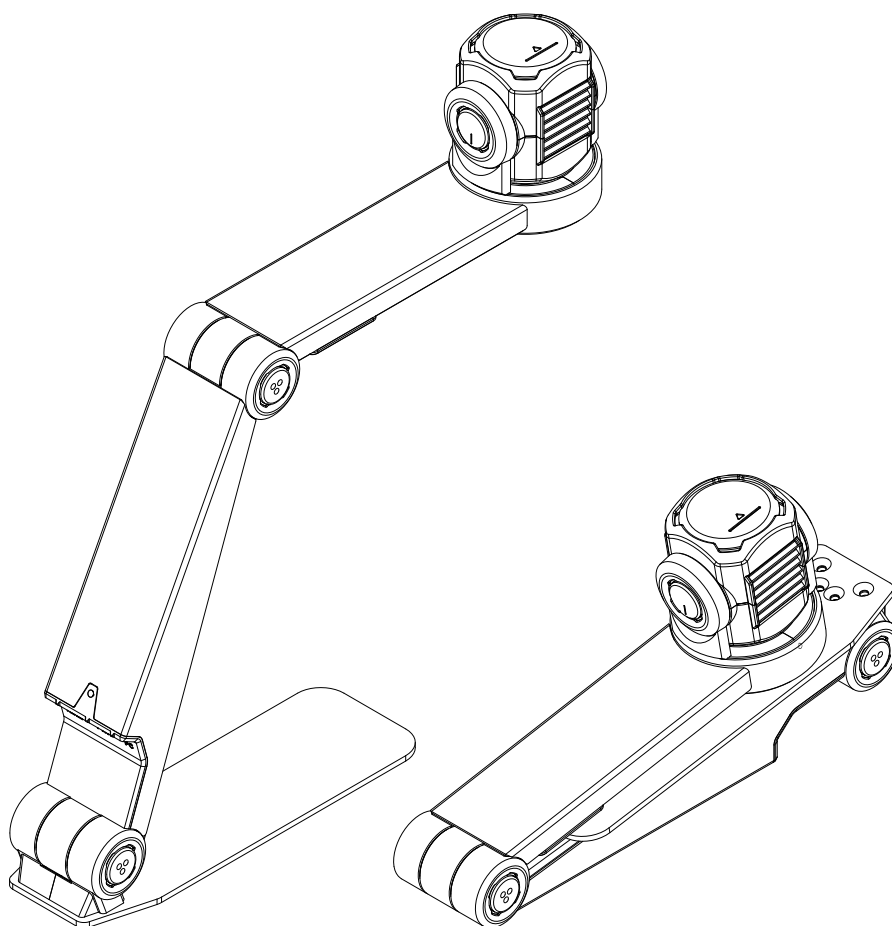

ZOOMCAM

20260918

Innehållsförteckning

KAPITEL 1: SÄKERHETS OCH UNDERHÅLL	3
Säkerhetsinstruktioner	3
Rengöring, rekonditionering, underhåll	3
KAPITEL 2: INSTALLATION	4
Innehåll	4
Installation	4
Kamerans position	5
Anslutningar	6
Läsplatta	6
Strömförsörjning	6
Anslut ZoomCam till en skärm	7
ANSLUT ZOOMCAM TILL EN DATOR ELLER PLATTA	7
KAPITEL 3: DRIFT	7
FJÄRRKONTROLL	7
Ikoner	8
Slå PÅ/AV	9
KAMERANS POSITION	10
POSITIONSSENSOR	10
KAPITEL 3: ANVÄNDA ZOOMCAM PÅ EN SKÄRM	11
KAPITEL 4: ANVÄNDA ZOOMCAM PÅ EN DATOR ELLER SURFPLATTA	11
BILDHASTIGHET OCH UPPLÖSNING	11
WINDOWS (LAPTOP, PLATTA, BORDSDATOR)	11
Mac OS (bärbar dator, persondator)	15
Android (surfplatta, smartphone)	16
CHROME OS (CHROMEBOOK)	17
KAPITEL 6: ANVÄNDNINGSTIPS	17
Läsning	17
Titta på foton	17
Hantverk	18
Handstil	18
KAPITEL 7: GARANTI	19
Garanti	19
Garantibestämmelser	19
Serviceuppfyllelse	19
SPECIFIKATIONER	19

Kapitel 1: Säkerhets och underhåll

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Strömförsörjningen får endast bytas ut mot samma typ (5V, max. 3A, AC/DC-adapter av medicinsk kvalitet (EN60601-1)) efter att enheten har stängts av och adaptern tagits bort från nätet.
- Anslutningarna har utformats för att endast ansluta på 1 sätt. Tvinga aldrig fram en anslutning. Installera enhetens strömförsörjning i ett väl ventilerat utrymme.
- Försök aldrig reparera enheten själv. Det är farligt att ta bort skyddskåpor som är till för att förhindra elektriska stötar. Du måste kontakta KOBAS Vision eller din återförsäljare vid defekter.
- För att undvika elstöt, placera inte enheten på en plats där den kan komma i kontakt med vätskor.
- Se användarmanualen för skärmen eller andra anslutna externa enheter för specifika säkerhetsinstruktioner relaterade till denna enhet.
- Spara denna manual noggrant. Den innehåller all nödvändig information om din enhet.
- Förvara enheten på en torr, välventilerad och ren plats. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller en värmekälla.
- Använd aldrig denna enhet i omgivningstemperaturer över 35°C.
- Denna enhet är utformad som hjälp för att förstora dokument. Varje ändring av syfte ogiltigförklarar CE-märkningen.
- Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas. Kasta inte din gamla produkt i ditt vanliga hushållsavfall. Kassera hela produkten (inklusive dess kablar, kontakter och tillbehör) i avsedda insamlingsställen.



RENGÖRING, REKONDITIONERING, UNDERHÅLL

- Koppla bort alla kablar från enheten innan rengöring.
- Rengöring av enheten och linsen: Använd en lätt fuktad duk avsedd för rengöring av datorskärmar och teknik. Undvik starka rengöringsmedel eller lösningsmedel. Desinfektionsmedel kan användas i viss utsträckning.
- Vätskor: Låt aldrig vätska tränga in i enheten, detta kan orsaka elektriska skador eller kortslutning.
- Behandla din enhet med omsorg och du kommer att ha glädje av den i många år framöver.
- Allmän skötsel: Hantera enheten varsamt för att förlänga dess livslängd och undvika mekaniska skador.

Kapitel 2: Installation


INNEHÅLL

ZoomCam levereras med följande innehåll:

- ZoomCam kamera
- USB-C – USB-C 3- kabel (1 meter)
- USB-C – USB-A 3-kabel (1 meter)
- HDMI -kabel (2 meter)
- USB-C strömförsörjning
- Fjärrkontroll
- 2x AAA-batterier
- Skyddsväska
- Läsplatta
- Användarmanual

INSTALLATION

1. Tryck på den stora runda knappen i gångjärnet mellan de två armarna på ZoomCam. Knappen har 3 taktila prickar.
2. Fortsätt att trycka på knappen medan du fäller ut armen tills knappen hoppar ut automatiskt.
3. Tryck på den stora runda knappen i gångjärnet mellan armen och foten. Knappen har 3 taktila prickar.
4. Fortsätt att trycka på knappen medan du fäller ut armen tills knappen hoppar ut automatiskt.
5. Vänd ZoomCam och ställ den på fotplattan.
6. Redo.

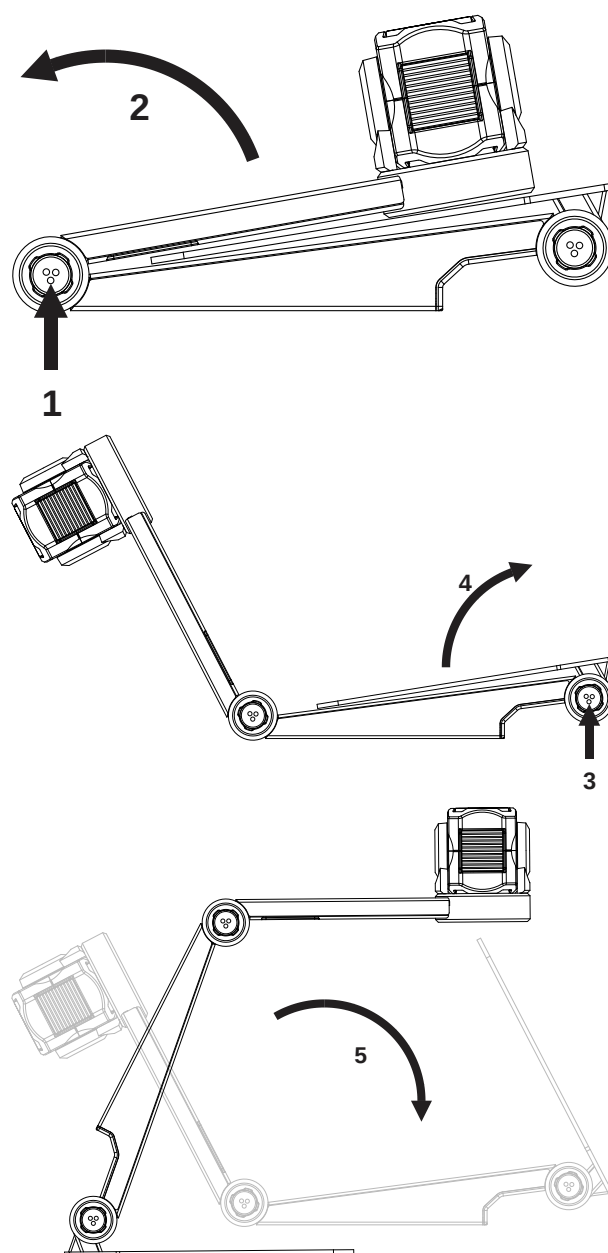


KAMERANS POSITION

ZoomCam kan användas på flera sätt eftersom kamerahuvudet kan vridas åt alla håll.


1. Bakom (rekommenderas)

Kameraarmen är placerad på baksidan. Vrid kameran runt sin axel för att rätta ut bilden. A3-ark kan flyttas fritt under kameran.

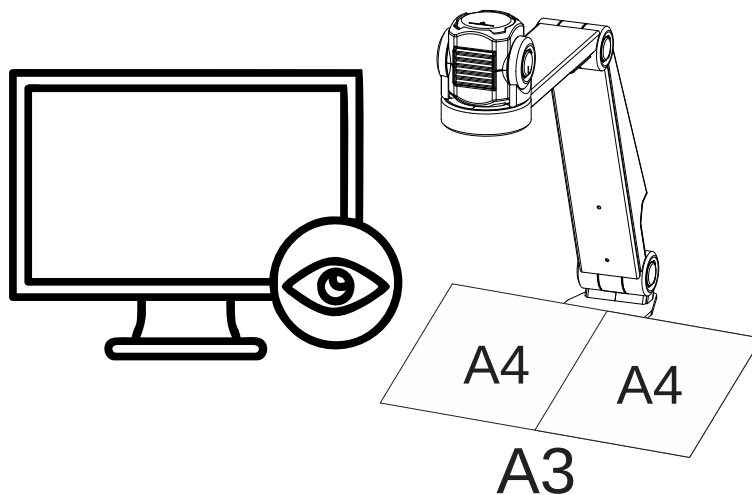

2. Vänster eller höger

Kamerabasen är placerad till vänster eller höger. Vrid kameran runt sin axel för att rätta ut bilden. A4-ark kan flyttas fritt under kameran.

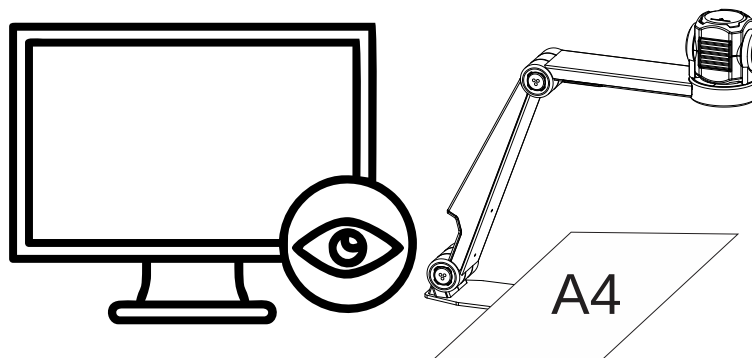

3. Andra befattningar

Vrid kameran runt sin axel för att justera bilden rakt.

ANSLUTNINGAR

1. HDMI


HDMI-anslutningen överför bilden från ZoomCam till en skärm. Detta kan vara en TV-skärm såväl som en monitor.

2. USB-C 3-port - POWER

Denna USB-anslutning kan ge extra ström. Denna USB-anslutning används om den andra USB-anslutningen inte ger tillräcklig ström eller för att ansluta ett externt batteri eller strömförsörjning.

3. USB-C 3-port - PC

USB-anslutningen överför bilden till en dator eller surfplatta. Anslutningen ger också ström till enheten. Denna USB-anslutning är **huvudanslutningen**.

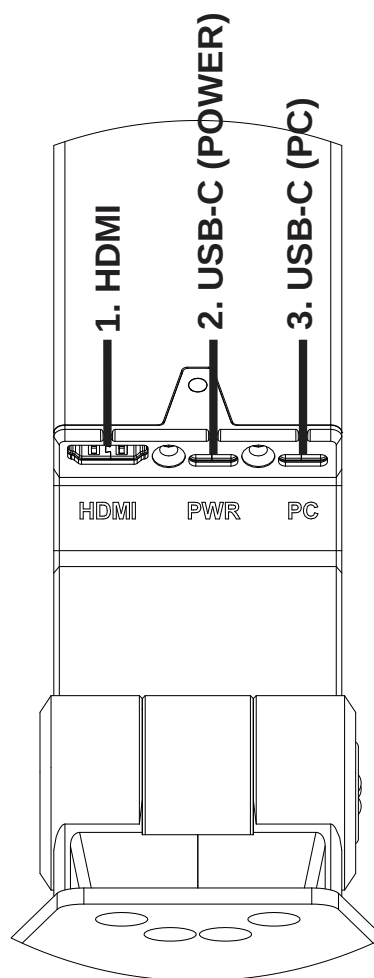

LÄSPLATTA

Läsplattan är avsedd att flytta dokument smidigare över ZoomCams fot. Med läsplattan kan dokument läsas mer bekvämt.

Placera det nedre spåret på läsplattan över foten på ZoomCam. Nu kommer du att ha en slät yta ovanför foten av ZoomCam för att flytta dokument.

STRÖMFÖRSÖRJNING

ZoomCam fungerar på extern ström. Ström kommer att tillföras till USB-portarna. Anslut USB-kabeln eller USB-strömförsörjningen. LED-lamporna på framsidan och baksidan informerar detaljer om strömkällan.

- 3x grön: Tillräcklig kraft. ZoomCam drivs via USB-C eller via 2 USB-A-kablar. ZoomCam kommer att slås på utan att ha problem med strömmen.
- 3x gul: Inte säker på tillräcklig effekt. ZoomCam drivs via en icke USB-C-källa. ZoomCam kan ha ett problem.
- 6x röd: ZoomCam kan inte slås på på grund av för mindre ström. Anslut en andra strömkälla via USB.

ANSLUT ZOOMCAM TILL EN SKÄRM

Anslut ZoomCam via HDMI. Driv enheten med den medföljande USB-C-adaptern eller genom att ansluta ZoomCam till en USB-port på skärmen som ger tillräckligt med ström. Använda:

- HDMI-kabel till HDMI-anslutning
- USB-C strömförsörjning eller USB-C - USB-A-kabel för anslutning till skärmen→ **anslut 1 av de 2 USB-anslutningarna**

ANSLUT ZOOMCAM TILL EN DATOR ELLER PLATTA

Använd USB-C (PC)-anslutningen för att ansluta ZoomCam till en dator, surfplatta eller smartphone. Om enheten inte har tillräckligt med ström, använd den andra USB-anslutningen (PWR). Använda:

- USB-C-kabel→ **anslut den till den yttre USB-C-kontakten (PC) - 3**
- Om ZoomCam inte har tillräckligt med ström eller om du vill ansluta ett externt batteri, använd en andra USB-kabel→ **anslut den till den mellersta USB-C-anslutningen (PWR) - 2**

USB 3, typ USB-C

ZoomCam fungerar optimalt med en USB 3, typ USB-C.

USB 3, typ USB-A

Det är också möjligt att använda en USB 3, typ USB-A. Denna port kanske inte ger tillräckligt med ström. Om ZoomCam inte får tillräckligt med ström blinkar lysdioden 6 gånger rött vid nästa uppstart. I det här fallet ansluter du ZoomCam med en USB-C-kabel, ansluter strömförsörjningen eller ansluter en andra USB-kabel till datorn eller surfplattan.

USB 2, typ USB-A

Det är också möjligt att använda en USB 2, typ USB-A. Den här porten ger inte tillräckligt med ström. Om ZoomCam inte får tillräckligt med ström blinkar lysdioden 6 gånger rött vid nästa uppstart. I det här fallet ansluter du strömförsörjningen eller ansluter en andra USB-kabel till datorn eller surfplattan.


Kapitel 3: Drift

FJÄRRKONTROLL

ZoomCam styrs med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har 2 AAA-batterier. På baksidan av fjärrkontrollen finns ett lock som du kan skjuta ner för att byta batterier.

Mottagaren är placerad mellan lamporna i den horisontella armen på ZoomCam.

Lysdioderna på fram- och baksidan av ZoomCam blinkar när en knapp trycks in på fjärrkontrollen.

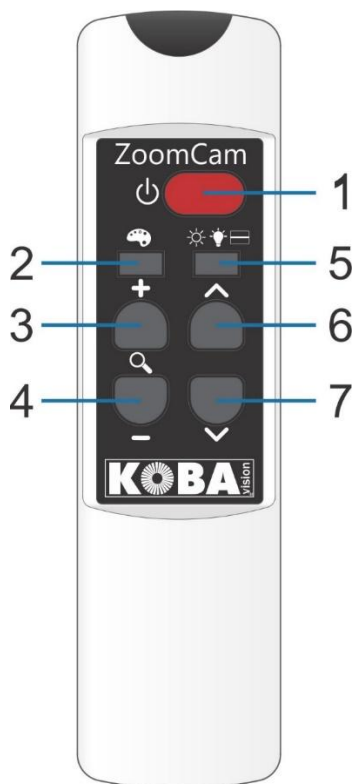

1	Tryck kort: slå PÅ Tryck länge: stäng AV
2	Tryck kort: s växla mellan fotoläge, negativ, positiv avläsning Tryck länge - negativ/positiv: ändrar färg på bakgrunden eller tecknen Tryck på långdistansvy: spegelvänd
3	Zooma in
4	Zooma ut
5	Tryck kort: växla mellan ljusstyrka/bakgrund, belysning, läslinje Tryck länge: växla mellan översikt och förstoring
6	Tryck i färgläge: öka ljusstyrkan Tryck i negativ eller positiv läsning: förbättra bakgrunden Tryck in belysning: mer ljus Tryck i läsraden: flytta raden upp
7	Tryck i färgläge: minska ljusstyrkan Tryck i negativ eller positiv läsning: minska bakgrunden Tryck in belysning: mindre ljus Tryck på läsraden: flytta raden nedåt

IKONER

ZoomCams funktioner visas med ikoner på skärmen. För vissa funktioner kommer du att se en röd förloppsindikator till vänster om ikonerna för att indikera hur funktionen är inställd eller hur den förändras.





Förstoring. Kameran zoomar in eller ut.




Fotoläge. I den här vyn är kamerabilden oredigerad.



Negativ – positiv läsning. I detta läge omvandlas bilden till konstgjorda färger för hög kontrast. Genom att trycka länge på färgknappen kan du ställa in andra färger .

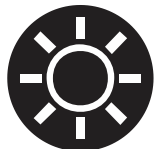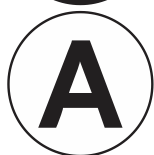

Ljusstyrka. Öka eller minska bildens ljusstyrka.

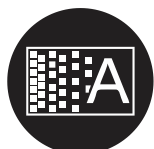

Bakgrund. För att filtrera bakgrunden eller ändra tjockleken på bokstäverna.



Belysning . Justerar de belysning .



Läsrad. Bilden har en horisontell linje. Du kan flytta raden uppåt eller nedåt.



Översikt. I den här vyn zoomar kameran till en liten förstoring för att ge överblick.



Spegling. Denna vy är endast tillgänglig i avståndsläge. I spegelläge kan du rikta kameran mot dig själv.

SLÅ PÅ/AV

I kombination med en skärm eller bildskärm

Slå på med **knapp 1** . De flesta skärmar slås på automatiskt av ZoomCam. Om detta inte händer, slå på skärmen och välj rätt källa (se skärmmanualen).

ZoomCam stängs av genom att trycka på **knappen 1** länge.

I kombination med en dator eller surfplatta (streaming)

ZoomCam slås på automatiskt av tittaren.


ZoomCam stängs av genom att stoppa strömmen, genom att stänga programmet eller genom att välja en annan kamera. ZoomCam stängs av med en fördröjning på 30 sekunder som standard. Under dessa 30 sekunder är bilden omedelbart tillgänglig när streamen startas igen.

KAMERANS POSITION

Kameran har ett 2-dimensionellt huvud som kan justeras manuellt.


Rotera

Genom att rotera kameran kan du rotera bilden och justera den korrekt så att texten hamnar rätt på skärmen.

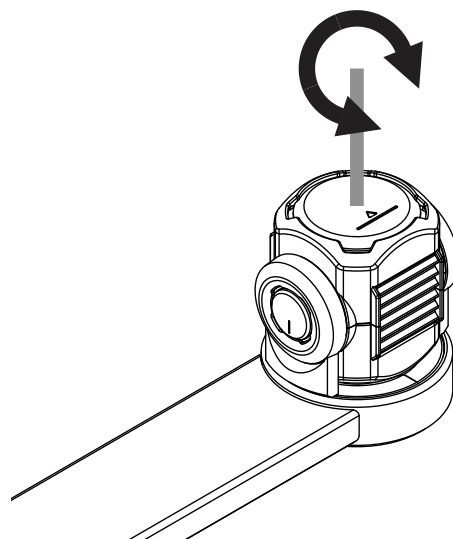

Tilt (växla mellan läsning och avståndsvy)

Genom att luta kameran upp och ned väljer du att läsa under kameran eller att använda den för avståndsvisning.

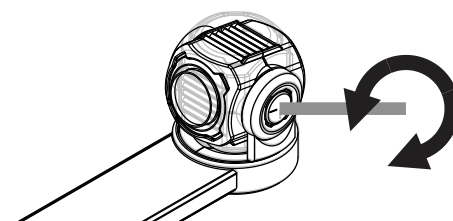

POSITIONSSENSOR

ZoomCam har en sensor som känner av kamerans position. ZoomCam vet om kameran ser avståndet eller används för att läsa. Förinställningarna mellan de 2 lägena lagras enligt sensorn. ZoomCam kommer ihåg inställningarna för:

- Förstoring
- Färg
- Ljusstyrka
- Bakgrund
- Belysning
- Läsrad

Kapitel 3: Använda ZoomCam på en skärm

För att använda ZoomCam med en skärm, anslut ZoomCam till skärmen med en HDMI-kabel. ZoomCam är kompatibel med en digital skärm som har en HDMI-, DVI- eller DisplayPort-anslutning. En HDMI-HDMI-kabel medföljer ZoomCam. För en skärm med en annan anslutning behöver du en annan kabel (ingår ej).

Anslut HDMI-kabeln. Anslut även en strömkälla. Du kan ansluta den medföljande USB-C-adaptern till vägguttaget eller så kan du använda USB-C - USB-A-kabeln för att driva ZoomCam via skärmen. Obs: inte alla skärmar har en USB-port med ström eller tillräckligt med ström.

För att visa bilden på skärmen, välj rätt källa på skärmen.

Kapitel 4: Använda ZoomCam på en dator eller surfplatta

För att använda ZoomCam med en dator eller surfplatta, anslut ZoomCam via en USB-kabel. Vi rekommenderar att du använder en USB 3, USB-C-port. Om detta inte är tillgängligt kan du även använda en vanlig USB 3 (rekommenderas för bättre prestanda) eller USB 2, USB-A-port. Med en USB-A-port kan det vara så att det inte finns tillräckligt med ström. Anslut i så fall en andra USB-kabel, strömförsörjningen eller ett externt batteri.

Genom att ansluta enheten konfigureras ZoomCam automatiskt i operativsystemet.

BILDHASTIGHET OCH UPPLÖSNING

ZoomCam har en upplösning på 1920 x 1080 och en bildhastighet på 60 bilder per sekund. Du kan uppnå denna hastighet med en USB 3-anslutning.

ZoomCam minskar automatiskt bildhastigheten när anslutningen inte är optimal. Som en lösning kan du:

- Minska upplösningen i tittaren. Bildfrekvensen kommer att ökas automatiskt.
- Använd en USB 3-kabel.
- Använd en dator/surfplatta med USB 3-port.
- Använd en högpresterande dator.
- Använd ett högpresterande program för att visa bilderna.

WINDOWS (LAPTOP, PLATTA, BORDSDATOR)

ZoomCam fungerar bäst i kombination med en Windows-dator eller surfplatta utrustad med en USB 3-port, helst USB-C. ZoomCam testades framgångsrikt på flera enheter, men det finns ingen garanti för att ZoomCam kommer att fungera på alla enheter.

Under Windows visar ZoomCam bilder i olika program.

SuperNova (helskärm och delad skärm)



Du kan sätta på eller stänga av "Anslut och visa" med hjälp av "Visuell" alternativen i SuperNova kontrollpanel.


Snabbtangenter: ALT + NUMERISK ENTER (dator) eller VÄNSTER SKIFT + CAPS LOCK + 0 (bärbar dator).

När du slår på "Anslut och visa" börjar en del av skärmen att visa bilden från kameran eller whiteboardtavlan. Detta område kallas Viewer. Du kan ändra positionen för Viewer på skärmen och du kan använda Viewer Toolbar för att justera bildens storlek, färg och kontrast för att göra den lättare att se.

Väljer kamera

I alternativet "Visuellt", öppna undermenyn "Anslut och visa" och välj "Inställningar". Dialogrutan "Anslut och visa inställningar" öppnas och visar inställningarna för "Kamera".

- Välj ZoomCam från listan "Enheter".
- Markera Använd kamera optisk zoom. Det gör att SuperNova kan styra kamerans förstoring, vilket förbättrar bildkvaliteten.
- Markera Använd kamerans färgbyte . Det gör att SuperNova kan styra kamerans färger , vilket förbättrar bildkvaliteten.
- TIPS: Under knappen Inställningar kan du ställa in upplösningen. Vi rekommenderar att du väljer 1920 x 1080, 60 fps. Om bilden är långsam kan du sänka upplösningen.
- Välj OK -knappen .

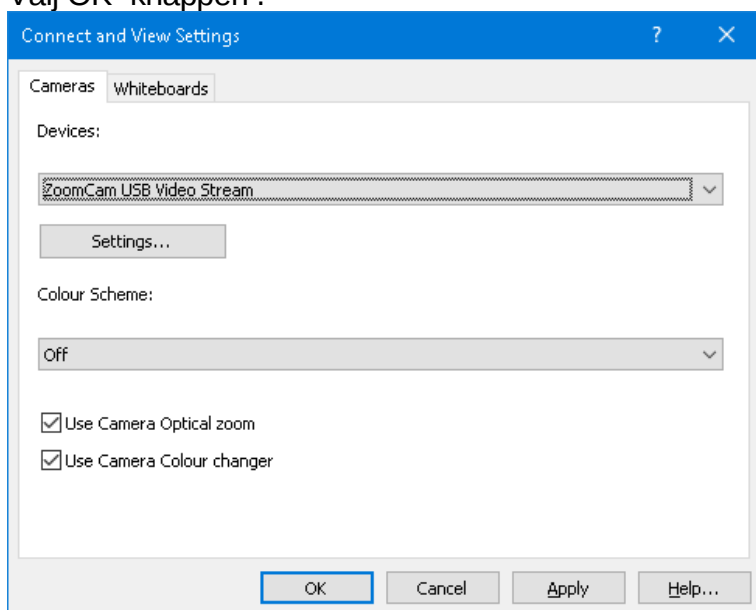

Justera tittarens position och storlek

Som standard visas Viewer på den övre halvan av skärmen. Du kan ändra positionen och storleken på Viewer genom inställningarna "Anslut och visa" i SuperNova kontrollpanel. Du kan docka tittaren till toppen, botten,

vänster eller höger sida av skärmen och Viewer kan ställas in så att den fyller 80 %, 50 % eller 20 % av skärmytan.

Du kan också ställa in Viewer på "Helskärm". När du är i helskärmsläge kan du fortsätta att använda CAPS LOCK + MELLANSKNAPPEN för att växla mellan Viewer och skrivbordet.

Växla mellan Viewer och skrivbordet

För att komma åt Viewer-verktygsfältet och göra justeringar av bilden måste du placera fokus i Viewer-området.

Du kan växla mellan Viewer och skrivbordet genom att trycka på CAPS LOCK + MELLANST MUSKNAPP. Om du har både en aktiv kamera- och whiteboardanslutning kan du växla mellan kamera, whiteboard och skrivbord genom att trycka på CAPS LOCK + MELLANST MUSKNAPP.

Förstoring



Du kan ändra storleken på bilden i Viewer genom att använda förstöringsknapparna i Viewer Toolbar. Om du använder en pekskärmsenhet kan du också ändra förstoringen genom att nypa med två fingrar eller sträcka ut två fingrar.



Du kan också använda följande snabbtangenter:

- Zooma in: VÄNSTER KONTROLL + NUMPAD PLUS eller CAPS LOCK + MUS HJUL UPP eller ALT + LIKA
- Zooma ut: VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK MINUS eller CAPS LOCK + MUSHJUL NED eller ALT + BINDSTEST



Använd alltid SuperNova i optisk zoomläge. Detta har det bästa resultatet.

Denna ikon betyder att du är i optisk zoomläge.

Ändra färgerna på bilden



Om du tycker att det är svårt att se bilden på grund av färgerna och kontrasten, kan du använda knappen Färgväxlare för att bläddra igenom ett antal olika färgscheman.

Låsning bilden



Lås bild-knappen låter dig frysa skärmen på den aktuella bilden. Detta gör att du kan utforska bilden mer i detalj utan att bilden kan ändras.



Även om det är tillgängligt som en Viewer Toolbar-knapp när du använder en kamera, kanske du tycker att det här alternativet är mer användbart när du tittar på presentationer eftersom det låter dig frysa skärmen på en viss bild istället för att lita på att läraren stoppar presentationen vid den tidpunkten. När du låser upp bilden uppdaterar Viewer den aktuella kamerabilden eller visar den nuvarande presentatörens datorskärm.

Fånga bild



Knappen Ta bild låter dig kopiera bilden i Viewer till Windows Urklipp. Genom att trycka på CAPS LOCK+P kopieras också bilden i Viewer till Windows Urklipp.

Du kan sedan kopiera bilden till ett dokument eller så kan du konvertera bilden du har tagit till text genom att använda SuperNova "Skanna och läs" alternativ, eller genom att trycka på VÄNSTER KONTROLL+CAPS LOCK+O.

Högläsning



OCR-knappen låter dig OCR-bilda av kameran.

Andra funktioner


Vi rekommenderar att du inte använder dem.

- Roter: Vrid kamerahuvudet på ZoomCam för att rotera bilden.
- Fokus: Justera inte detta. ZoomCam har en automatisk fokusering.

ZoomText (helskärm och delad skärm)

För att starta kameran klicka på kameraknappen på verktygsfältsfliken Verktyg, eller använd snabbtangenter: CAPS LOCK + CTRL + C.

Tips: När du använder kamerans snabbtangent med förinställda ZoomText-inställningar, visas den lagrade tangentbannern ovanpå kamerabilden. Inaktivera bannern via ZoomText – Kommandotangenter – Knapp Bannerinställningar – Avmarkera Visa den lagrade tangentbannern.

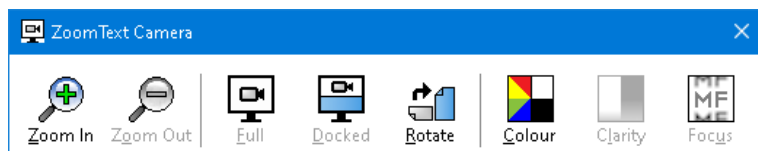


Om kameraverktygsfältet inte är synligt trycker du på CAPS LOCK + CTRL + C för att aktivera kamerans skiftade tangentkommandoläge och trycker sedan på T för att visa verktygsfältet.

Väljer kamera

På fliken Verktyg i verktygsfältet klickar du på pilen bredvid Kamera eller navigerar till Kamera och trycker på nedåtpilen. Välj Inställningar i menyn Kamera.

- I listrutan Aktiv kamera väljer du ZoomCam USB-videoström.
- Inaktivera: Ställ in kameraupplösning automatiskt.
- Upplösning : 1920 x 1080
- Bildhastighet : 60 FPS
- Klicka på OK.
- TIPS: Spara dina inställningar under ZoomText – Konfigurationer – Spara som standard. Detta kommer att spara dina inställningar så att du inte behöver göra om alla inställningar igen.

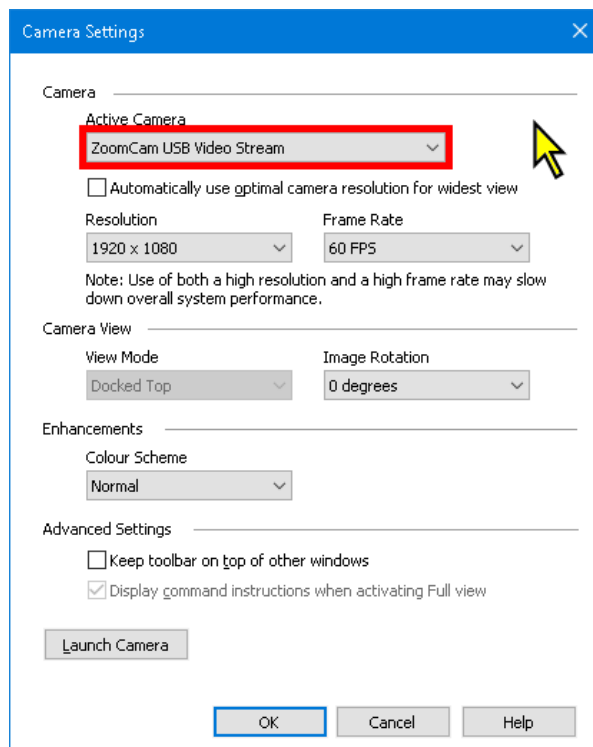

Justera tittarens position och storlek

I kameraverktygsfältet kan du välja:

- **Helskärm:** hela skärmen visar bilden av ZoomCam. För att växla mellan fullständig och dockad vy, tryck på CAPS LOCK + CTRL + C för att aktivera läget för skiktade tangenter, tryck sedan på Tabbar för att växla mellan dockad / hel vy.
- **Dockad vy (delad skärm):** bilden av ZoomCam visas på 50 % av skärmen. Du väljer var du vill att bilden ska visas. Du kan välja mellan: topp, höger, botten, vänster. Snabbtangenter: CAPS LOCK + VÄNSTER / HÖGER PIL

Förstoring

Använd knapparna på ZoomCam-fjärrkontrollen för att göra detta. Knapparna i ZoomText Camera Toolbar fungerar också, men de zoomar in och ut i stora steg.


Andra funktioner

Vi rekommenderar att du inte använder dem.

- **Rotera:** Vrid kamerahuvudet på ZoomCam för att rotera bilden.
- **Färg:** Ställ in denna funktion på normal. Använd ZoomCam-fjärrkontrollen för att justera färgerna .
- **Ljusstyrka:** Justera inte detta. Använd ZoomCam-fjärrkontrollen för att justera ljusstyrkan.
- **Fokus:** Justera inte detta. ZoomCam har en automatisk fokusering.

Windows kamera

- Öppna Windows Kamera .
- Klicka på Nästa kamera  om ZoomCam-bilden inte visas.
- Klicka på Inställningar  för att ändra upplösning och bildhastighet. Välj 1080p 16:9 60fps.

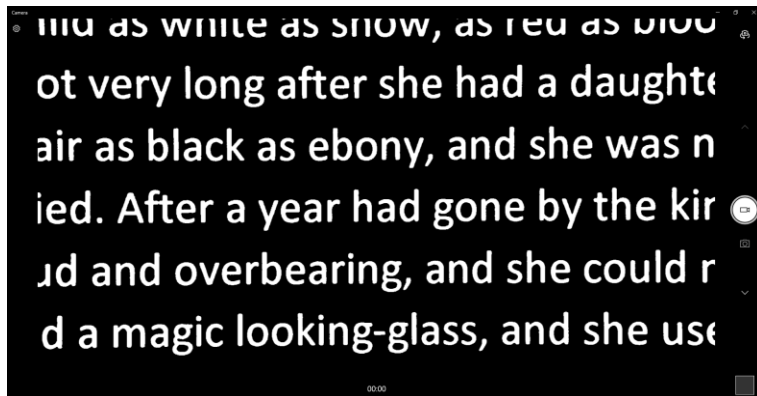


TIPS: I Windows Kamera har du möjlighet att ta en skärmdump eller spela in en video. För videon använder Windows Camera mikrofonen på din dator eller surfplatta.

MAC OS (BÄRBAR DATOR, PERSONDATOR)

ZoomCam fungerar bäst i kombination med en Mac-dator utrustad med en USB 3-port, helst USB-C. ZoomCam testades framgångsrikt på flera enheter, men det finns ingen garanti för att ZoomCam kommer att fungera på alla enheter.

- Installera Quick Camera -appen från Mac App Store.
- Öppna appen.
- Välj ZoomCam i menyn Kamera – Välj källa – ZoomCam USB-gränssnitt.
- I menyn Fönster kan du ställa in hur och i vilken position bilden ska visas.

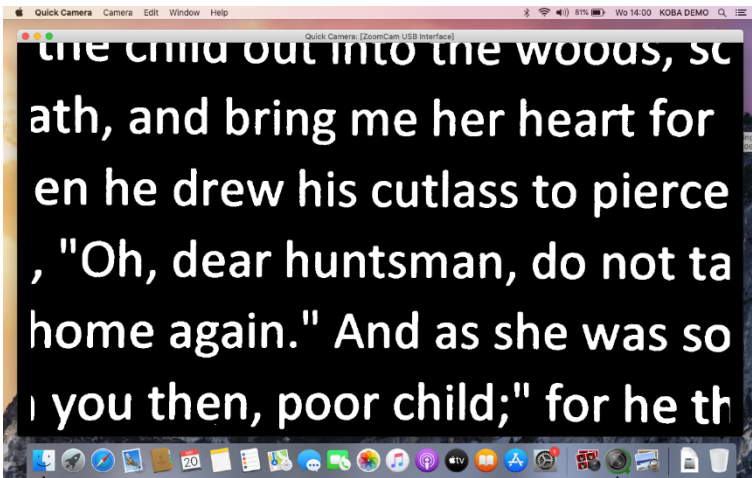


ANDROID (SURFPLATTA, SMARTPHONE)

ZoomCam fungerar bäst i kombination med en Android-surfplatta eller smartphone utrustad med en USB 3-port, helst USB-C. ZoomCam testades framgångsrikt på flera enheter, men det finns ingen garanti för att ZoomCam kommer att fungera på alla enheter.

- Installera appen USB Camera (Ininitegra , Inc.) från Google Play Butik.




- Öppna appen.

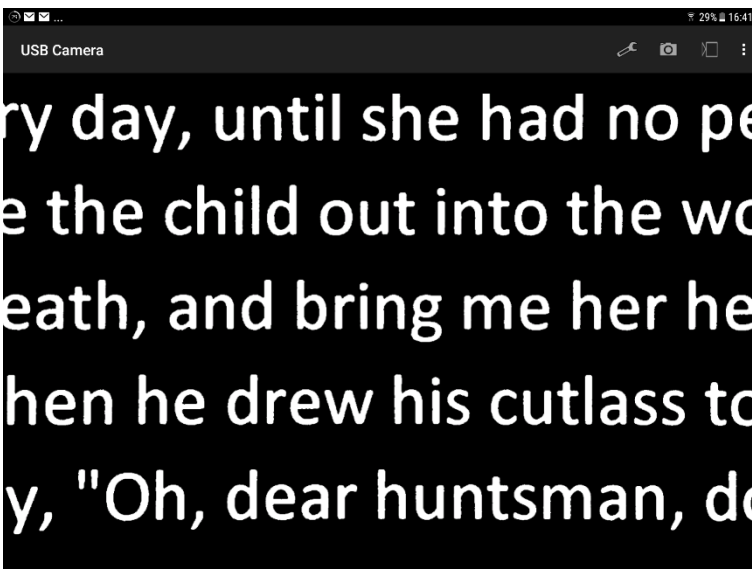

CHROME OS (CHROMEBOOK)

ZoomCam fungerar bäst i kombination med en ChromoBook utrustad med en USB 3-port, helst USB-C. ZoomCam testades framgångsrikt på flera enheter, men det finns ingen garanti för att ZoomCam kommer att fungera på alla enheter.

- Öppna appen Kamera  i startmenyn.
- Klicka på Nästa kamera  om ZoomCam-bilden inte visas.
- Klicka på Spegling  om du ser bilden i spegel.
- För bästa visning, klicka på Video .

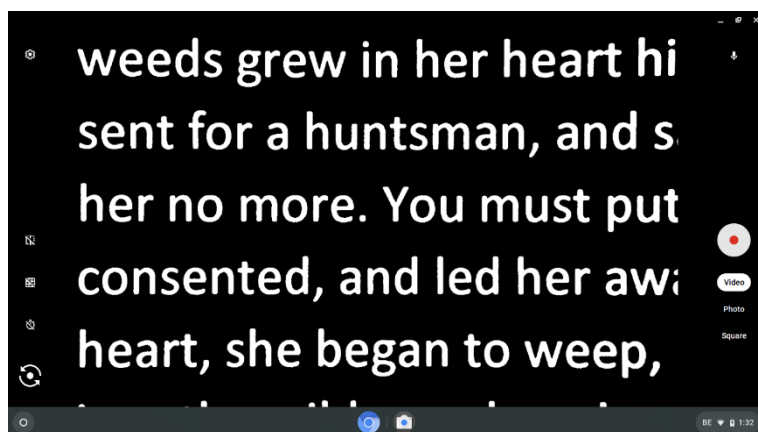

Kapitel 6: Användningstips

LÄSNING

Läsning görs bäst i positivt eller negativt läge. Dessa lägen anpassar bilden för synskadade till en högkontrastbild med förbättrad bakgrund. Bakgrund och bokstäver kan ställas in efter eget gottfinnande. Bakgrunden kan ställas in med hjälp av bakgrundsdämpning. Detta gör att du kan filtrera bort strukturen på ett ark. Denna unika KOB Vision-funktion låter dig alltid ställa in en bakgrund med hög kontrast utan irriterande pappersföroreningar. En tidning kan läsas utan irriterande pappersföroreningar. Fabriksinställningarna tar dig tillbaka till de ursprungliga inställningarna.

TITTA PÅ FOTON

Bilder ses bäst i fotoläge. Detta läge är en obearbetad bild utan kontrastförbättring. Genom att ändra ljusstyrkan kan du justera bilden så att bilden blir tydligt synlig. Kvaliteten förbättras något när autofokus låses.

HANTVERK

Hantverk görs bäst med en liten förstoring. Det är bättre att välja en mörk bakgrund under denna aktivitet så att kameran inte hindras av stora skillnader i kontrast till det som mörkas av händerna.

HANDSTIL

Du kan också skriva under ZoomCam. Det är bäst att använda en svart penna och fodrat papper.

Kapitel 7: Garanti

GARANTI

Garantitjänster tillhandahålls av KOBÄ Vision eller återförsäljare som agerar på uppdrag av KOBÄ Vision. När ZoomCam inte kan repareras korrekt förbehåller sig KOBÄ Vision rätten att byta ut läsenheten mot en likvärdig enhet. Alla komponenter och produkter som byts ut inom garantiperioden blir KOBÄ Visions egendom.

GARANTIBESTÄMMELSER

Garantin blir ogiltig om KOBÄ Vision ZoomCam:

- Användes inte enligt instruktionerna eller har missbrukats
- Var skadad till följd av ett fall eller en stöt
- Har plockats isär eller mixat med
- Reparerades tidigare av en icke-officiell servicepartner

Följdförlust täcks under inga omständigheter av garantin. KOBÄ Vision kommer varken att ta på sig något som helst ansvar eller acceptera någon möjlighet till ansvar förutom de garantibestämmelser som uttryckligen anges ovan. Denna begränsning av ansvaret innebär inte ett brott mot kundens lagliga konsumenträttigheter eller hans eller hennes rättigheter gentemot säljaren.

SERVICEUPPFYLLELSE

Innan du gör anspråk på garantin eller servicen och innan du kontaktar KOBÄ Vision eller en återförsäljare måste du notera produktnamn, serienummer, inköpsdatum, fakturanummer och eventuella felmeddelanden eller särskilda problemspekter.

Specifikationer

Specifikationer

Ingångar	• HDMI OUT • USB-C (ZoomCam USB Video Stream) • USB-C (ström)
Strömförsörjning	• Ingång: 5V DC • 1,5A
Maximal betraktningvinkel	230 mm
Minsta betraktningvinkel	10 mm

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ